
Apart Hee Magic Mask do leczenia trądziku

Instrukcja obsługi



Spis treści

Wprowadzenie.....	2
Przeznaczenie	2
Budowa i części składowe.....	2
Ostrzeżenia i środki bezpieczeństwa	3
Możliwe działania niepożądane	4
Ładowanie akumulatora litowo-jonowego.....	4
Wskaźniki akumulatora.....	5
Działanie produktu	5
Funkcje diod LED na panelu.....	5
Sposób użycia	6
Specyfikacja techniczna	7
Rozwiązywanie problemów	7
Objaśnienie symboli	8
Czyszczenie i konserwacja.....	8
POZBYWANIE SIĘ URZĄDZENIA.....	9
GWARANCJA	9
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (EMC).....	9

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie urządzenia OI-037 Magic Mask. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem i zachowanie tej instrukcji obsługi do wykorzystania w przyszłości.

Magic Mask, to urządzenie do terapii światłem LED, które wykorzystuje 3 światła (niebieskie / czerwone / podczerwone). Światła LED działają poprzez delikatne wnikanie w skórę na różnych głębokościach, aby stymulować fizjologię skóry. Niebieskie światło zwalcza trądzik wywołany bakteriami. Czerwone światło zmniejsza stany zapalne wywołane trądzikiem i odmładza skórę. Światło podczerwone stymuluje aktywność komórkową i wspomaga produkcję kolagenu. Zwiększa elastyczność skóry i zmniejsza zmarszczki.

Oprócz leczenia trądziku, urządzenie posiada również funkcję upiększającą (tj. redukcji zmarszczek na twarzy). Urządzenie jest nowym rewolucyjnym produktem do pielęgnacji skóry stosowanym w celu zachowania i wzmocnienia Twojego naturalnego piękna.

Wystarczy umieścić lekką maskę na twarzy, a następnie nacisnąć przycisk funkcyjny, aby wybrać odpowiedni tryb zabiegu. Urządzenie wyłączy się automatycznie po każdym cyklu zabiegowym.

Przeznaczenie


Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w leczeniu łagodnego i umiarkowanego trądziku i złagodzenia zmarszczek mimicznych.

Budowa i części składowe

1. Jednostka główna Magic Mask
2. USB
3. Instrukcja obsługi



Przycisk funkcyjny /
Stan akumulatora

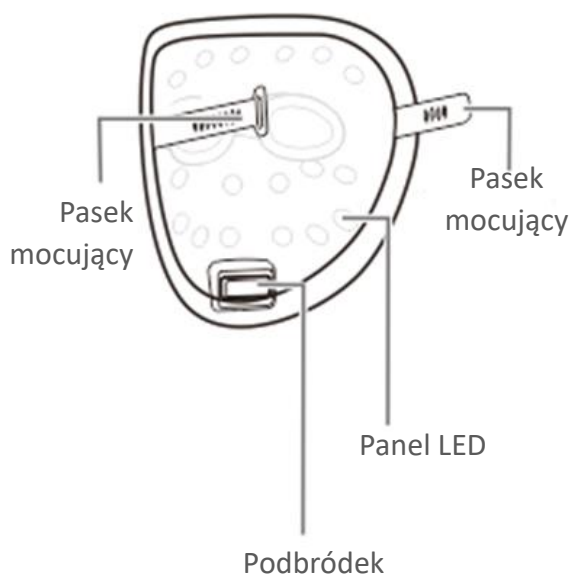

Pasek
mocujący

Pasek
mocujący

Panel LED

Podbródek



Port USB

Włącznik zasilania

Ostrzeżenia i środki bezpieczeństwa

 **Przed użyciem urządzenia upewnij się u dermatologa, czy jakiegokolwiek zmiany skórne wynikają z obecności nowotworu lub wskazują na przedrakowe zmiany skórne.**

- Aparat nie nadaje się dla osób z rozrusznikiem i serca lub innym wszczepionym urządzeniem medycznym.
- Nie stosować na otoczkę piersi lub błony śluzowe narządów płciowych.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jesteś w ciąży, możesz być w ciąży lub karmisz piersią, ponieważ ryzyko jest nieznane i nie zostało ustalone.

 **Nigdy nie używaj urządzenia w następujących przypadkach:**

- Jeśli w przeszłości występował postępujący nowotwór skóry np. czerniak, zmiany przedrakowe lub nietypowe plamy kosmetyczne w strefie, która ma być leczona.
- Jeśli masz infekcję skóry, opryszczkę pospolitą lub zmiany egzemy w strefie, która ma być leczona.
- Jeśli Twoja skóra jest wrażliwa na światło, co objawia się podrażnieniami lub reakcją alergiczną.
- Jeśli obecnie stosujesz leki, które mogą powodować wrażliwość skóry na światło.
- Nie używaj urządzenia podczas ładowania akumulatora.

Uwagi:

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego, a nie komercyjnego lub profesjonalnego.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do leczenia przeciwtrądzikowego i przeciwstarzeniowego.
- Przerwij stosowanie, jeśli odczuwasz dyskomfort lub zaczerwienienie skóry lub przebarwienia utrzymujące się dłużej niż 24 godziny i zaleca się skonsultowanie się z lekarzem.

Środki ostrożności:

- Pacjent jest zamierzonym użytkownikiem tego urządzenia. Pacjent może używać i konserwować urządzenie i jego akcesoria zgodnie z niniejszą instrukcją.
- Nie serwisuj i nie konserwuj urządzenia, gdy jest ono używane.
- Używaj urządzenia wyłącznie z dostarczonymi akcesoriami.
- Emitowane światło może być szkodliwe dla oczu. Nie wpatruj się w źródło światła ani nie patrz bezpośrednio w emitowaną wiązkę światła.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku.
- Nie używaj urządzenia w tym samym pomieszczeniu, co osoba korzystająca z butli z tlenem lub pojemnika z aerozolem, ze względu na ryzyko pożaru.
- Nie potrząsaj, nie upuszczaj ani nie uderzaj mocno urządzenia.
- Nie używaj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie sprzętu krótkofalowego lub mikrofalowego.
- Nie podłączaj tego urządzenia do innego sprzętu, aby uniknąć zakłóceń, należy trzymać się z dala od urządzeń o wysokiej częstotliwości.
- Żadna modyfikacja tego urządzenia nie jest dozwolona.
- Znaczne ryzyko wzajemnych zakłóceń może stwarzać obecność urządzeń wykonujących określone badania lub zabiegi. Mogą wystąpić potencjalne zakłócenia elektromagnetyczne lub inne między systemem a innym urządzeniem. W przypadku wystąpienia takich zakłóceń należy przenieść sprzęt w inne miejsce.


-
- Urządzenie wymaga szczególnych środków ostrożności dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej i musi być zainstalowane i uruchomione zgodnie z informacjami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.
 - Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Kabel USB może spowodować uduszenie. Upewnij się, że dzieci nie mogą bawić się urządzeniem
 - Nie zaleca się korzystania z tego urządzenia dzieciom poniżej 12 roku życia.

Możliwe działania niepożądane

U niektórych osób może wystąpić łagodna suchość skóry, łagodny rumień lub łagodne i lekkie zaczerwienienie. Reakcje te mogą ustąpić samoistnie w krótkim czasie. Jeśli te negatywne reakcje utrzymują się przez długi czas, zaleca się konsultację z lekarzem.

Ładowanie akumulatora litowo-jonowego

1. Przygotuj jednostkę główną Magic Mask i kabel USB.
2. Podłącz do gniazdka ładowania urządzenia kabel USB połączony z zasilaczem.

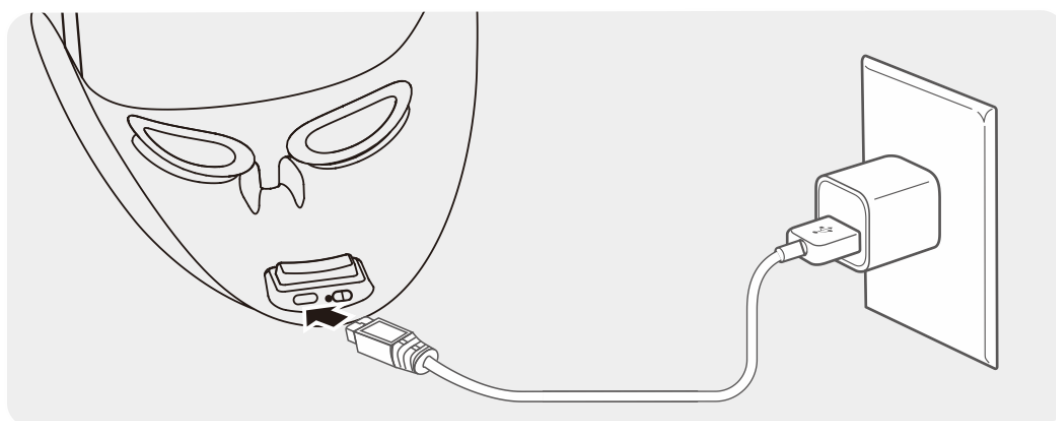

Uwaga: Zasilacz sieciowy nie wchodzi w skład zestawu. Zalecanym zasilaczem sieciowym powinien być medyczny zasilacz z wyjściem DC 5.0 V, 1.0 A zgodny z normami IEC60601-1 / UL60601-1 i IEC60601-1-2 / EN60601-1-2 odpowiednimi dla tego rodzaju urządzenia (np. "wejście 100-240 V, 50/60 Hz, 0.2 A; wyjście 5,0 V, 1 A").

3. Wskaźnik akumulatora będzie migać podczas ładowania.
4. Czas ładowania wynosi około 2-3 godziny. Ładowanie zostanie zakończone, gdy wskaźnik przestanie migać i zmieni kolor na zielony,.
5. W pełni naładowany akumulator może być używana przez około 80 minut.

Wskaźniki akumulatora

Włącz włącznik zasilania w pozycję (ON), a zacznie migać zielone światło. Po 30 sekundach bezczynności, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb oszczędzania energii.

Wskaźnik stanu akumulatora emituje dwa kolory oznaczające różny stan naładowania.

Urządzenie jest w użyciu

- Zielony: Stan akumulatora jest wystarczający do zabiegu.
- Czerwony: Niski stan akumulatora, proszę naładować.

Uwaga: Gdy stan akumulator jest niski i wymaga naładowania, zacznie migać czerwone światło i będzie emitowany sygnał dźwiękowy: "Bi Bi Bi Bi"

Urządzenie jest w trakcie ładowania

- Miganie na zielono: stan naładowania akumulatora na poziomie 30% - 80%.
- Zielone światło: ładowanie akumulatora zakończone.

Uwaga: Naładuj akumulator, jeśli urządzenie było przechowywane przez więcej niż 3 miesiące.

Działanie produktu

Urządzenie stosuje wąskie pasmo nisko energetycznego światła czerwonego + niebieskiego + podczerwonego. Wybrany rodzaj światła może wnikać w skórę i zapewnić niezbędną energię metabolizmu skóry, promować aktywność kolagenu, zmniejszać zaczerwienienia i stany zapalne związane ze zmianami trądzikowymi i tak dalej.

Funkcje diod LED na panelu

Czerwone diody LED

Zmniejsza zaczerwienienia i stany zapalne związane ze zmianami trądzikowymi. Zapobiega powstawaniu nowych blizn oraz poprawia koloryt i jasność skóry.

Niebieskie diody LED

Pomagają zwalczać tłustą skórę, regulując produkcję sebum i zabijając bakterie powodujące trądzik.

Diody LED na podczerwień

Stymulują aktywność komórkową i promują produkcję kolagenu.

Zwiększają elastyczność skóry i zmniejszają zmarszczki.


Uwaga: Oczy człowieka nie widzą światła podczerwonego, dlatego użytkownik nie widzi tego rodzaju światła podczas zabiegu.

Sposób użycia

Przed użyciem:

Przed zabiegiem skóra powinna być czysta i sucha.

1. Przesuń włącznik zasilania w pozycję ON, aby włączyć urządzenie.
2. Załóż urządzenie na twarz i odpowiednio dopasuj elastyczną opaskę, aby maska była we właściwej pozycji i była pewnie umocowana.
3. Naciśnij przycisk funkcyjny, aby wybrać odpowiedni tryb zabiegu, jak pokazano poniżej.

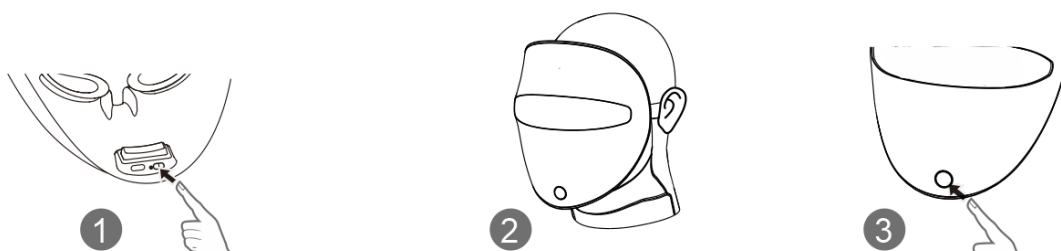

Tryb zabiegu (barwa LED)	Funkcja	Barwa światła	Minuty (zabiegu)	Ile razy dziennie
A (czerwona + podczerwień)	Kolor skóry i przeciwdziałanie starzeniu	Czerwona	15	1
B (czerwona + niebieska)	Leczenie trądziku	Różowa	15	1
C (niebieska + podczerwień)	Działanie bakteriobójcze i przeciwdziałanie starzeniu	Niebieska	15	1

4. Zrelaksuj się i ciesz się zabiegiem, diody LED wyłączą się automatycznie po zakończeniu zabiegu. Usłyszysz trzy kolejne sygnały dźwiękowe informujące o zakończeniu zabiegu.
5. Po zabiegu nałóż na skórę produkty nawilżające.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu: Magic Mask (magiczna maska)

Model: OI - 037

Zasilanie: 3,7 V / 780 mAh, wbudowany akumulator litowo-jonowy

Długość fali: Czerwona: 620nm - 640nm
Niebieska: 425nm - 450nm
Podczerwień: 820nm - 880nm

Maksymalna moc promieniowania optycznego: Czerwona: 0,4 mW / cm²
Niebieska: 0,75 mW/cm²
Podczerwień: 0,3 mW/cm²

Codzienna dawka energii: Czerwona + niebieska: 1,04 J / cm²
Czerwona + podczerwień: 0,63 J / cm²
Niebieska + podczerwień: 0,95 J/cm²

Czas zabiegu: 15 min dziennie

Rozmiar produktu: 179 mm * 192 * 91 mm

Normalne warunki pracy: Temperatura: 5 °C ~ 40 °C
Wilgotność względna: 30% RH ~ 80% RH
Ciśnienie atmosferyczne: 70 ~ 106 kPa










Warunki transportu i przechowywania: Temperatura: -20 °C ~ 55 °C
Wilgotność względna: <93% RH
Ciśnienie atmosferyczne: 70 ~ 106 kPa

Żywotność urządzenia: 2 lata

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nic się nie dzieje, gdy włącznik zasilania jest przesunięty na ON.	Rozładowany akumulator	Naładuj akumulator
Naciśnięto przycisk funkcyjny, brak reakcji lub ciemna dioda LED.	Rozładowany akumulator	Naładuj akumulator
	Dioda LED jest uszkodzona	Skontaktuj się ze sprzedawcą
Podczas ładowania, nie pali się wskaźnik ładowania	Kabel ładowania nie jest właściwie podłączony	Sprawdź, czy wtyczka po obu stronach kabla jest właściwie włożona. Odłącz, a następnie ponownie podłącz wtyczkę.
	Uszkodzony kabel USB	Odłącz kabel, a następnie podłącz ponownie. Lub wymień na nowy kabel USB.


Objaśnienie symboli

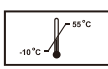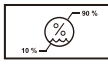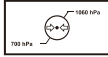	Ten symbol oznacza: Utylizacja zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE (WEEE)
	Ten symbol oznacza: uwaga
	Część aplikacyjna typu BF (część aplikowana to sonda)
	Przeczytaj instrukcję obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.
IP 22	Stopień ochrony przed materią i wodą. Pierwsza cyfra oznacza pyłoszczelność. Druga cyfra oznacza, że zabezpieczony przed skutkami chwilowego zanurzenia w wodzie
	Zgodny z europejską dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych (93/42/EWG i zmienioną dyrektywą 2007/47/WE.
	Informacje o producencie: Producentem jest: Netop Industrial Company Limited
EC REP	Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej.
SN	Symbol "NUMER SERYJNY"
LOT	Symbol kodu partii, reprezentuje datę produkcji
MD	Wyrób medyczny
	Symbol "Wartości graniczne temperatury"
	Symbol "Ograniczenie wilgotności"
	Ograniczenie ciśnienia atmosferycznego

Czyszczenie i konserwacja

- Wyczyść urządzenie miękką szmatką, gdy jest odłączone i wyłączone.
- Zwilż miękką szmatkę wodą i lekko wytrzyj urządzenie. Nie dopuść do tego, aby woda ani inne płyny nie dostały się do środka urządzenia. Pozostaw do wyschnięcia przed użyciem.
- Upewnij się, że wyłącznik zasilania jest wyłączony przed czyszczeniem.
- Naładuj w pełni akumulator, gdy urządzenie nie było używane przez dłuższy czas.
- Dobrze jest ładować akumulator przynajmniej raz na trzy miesiące.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie bardzo niskich temperatur oraz przez długi czas na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub promieniowania UV.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

POZBYWANIE SIĘ URZĄDZENIA

 Zużyte, całkowicie rozładowane akumulatory należy utylizować poprzez umieszczenie ich w specjalnie oznakowanym pojemniku do zbiórki zużytych baterii, w punktach zbiórki odpadów toksycznych lub za pośrednictwem sprzedawcy sprzętu elektrycznego. Prawidłowa utylizacja akumulatorów jest obowiązkiem prawnym.

Urządzenie należy utylizować zgodnie z obowiązkiem prawnym.

GWARANCJA

Urządzenie objęte jest roczną gwarancją, pod warunkiem, że jest użytkowane zgodnie z niniejszą instrukcją. Nigdy nie otwieraj ani nie demontuj urządzenia, co spowoduje utratę gwarancji.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub chęci uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (EMC)

Urządzenia medyczne produkowane przez NETOP INDUSTRIAL CO.LTD. są zgodne z normą IEC60601-1-2:2014 zarówno w zakresie odporności, jak i emisji.

Niemniej jednak należy przestrzegać specjalnych środków ostrożności:

- Wyroby medyczne nie powinny być używane w pobliżu lub w stosie z innym sprzętem. W przypadku, gdy konieczne jest użycie w sąsiedztwie lub w stosie, należy obserwować wyrób medyczny, aby zweryfikować normalne działanie w konfiguracji, w której będzie używany.
- Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi tabeli EMC dotyczącymi środowiska EMC, w którym urządzenie powinno być używane:
- Przenośny sprzęt komunikacyjny RF (w tym urządzenia peryferyjne, takie jak antenowy i anteny zewnętrzne) nie powinien znajdować się bliżej niż 30 cm od jakiegokolwiek części urządzenia, w tym określonych przez producenta. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia wydajności tego sprzętu.

W rzadkich przypadkach normalne działanie urządzenia może zostać zakłócone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne. Jeśli tak, po prostu zresetuj urządzenie, aby wznowić normalne działanie, postępując zgodnie z instrukcją obsługi. Jeśli funkcja nie może zostać wznowiona, użyj urządzenia w innym miejscu.

WYTYCZNE I ZALECENIA PRODUCENTA - DEKLARACJA EMISJI ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Wskazówki i deklaracja producenta – emisja elektromagnetyczna:		
Urządzenie KEFFORT jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym wyspecyfikowanym poniżej. Użytkownik urządzenia powinien upewnić się, że jest ono stosowane w takim środowisku.		
Testy emisyjne	Zgodność	Wskazówki - środowisko elektromagnetyczne
Emisja częstotliwości radiowych CISPR 11	Grupa 1	To urządzenie stosuje energię częstotliwości radiowych wyłącznie na użytek swoich własnych funkcji. Z tego względu emisje te są bardzo nieznaczne i praktycznie nie wywołują interferencji ze znajdującym się w pobliżu sprzętem elektronicznym.

Emisja częstotliwości radiowych CISPR 11	Klasa B	To urządzenie jest odpowiednie do użytku we wszystkich rodzajach obiektów (także w warunkach domowych), gdzie istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia urządzenia do publicznej sieci niskiego napięcia zasilającej obiekty gospodarstw domowych.
Emisja harmoniczna IEC 61000-3-2	Brak zastosowania	
Emisja w wyniku iskier i wahań napięcia IEC 61000-3-3	Brak zastosowania	

Wskazówki i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna

To urządzenie jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym wyspecyfikowanym poniżej. Użytkownik urządzenia powinien upewnić się, że jest ono stosowane w takim środowisku.

Test odporności	IEC 60601 poziom testowy	Poziom zgodności	Wskazówki – środowisko elektromagnetyczne
Wyładowania elektrostatyczne (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV kontakt ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV powietrze	±8 kV kontakt ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV powietrze	Podłoga powinna być drewniana, betonowa lub z kafli ceramicznych. Jeżeli jest pokryta materiałami syntetycznymi, to należy zachować względną wilgotność przynajmniej 30%.
Serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych IEC 61000-4-4	±2 kV dla linii zasilających	Brak zastosowania	Brak zastosowania
Przebiegi IEC 61000-4-5	±1 kV linia(e) do linii,	Brak zastosowania	Brak zastosowania
Zapady napięcia, krótkie przerwy lub zmiany napięcia na przyłączy zasilania IEC 61000-4-11	0% UT 0.5 cyklu, przy 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° i 315° 0% UT przez 1 cykl i 70% UT 25/30 cykli, pojedyncza faza przy 0° 0% UT 250/300 cykli	Brak zastosowania	Brak zastosowania
Częstotliwość sieci elektromagnetycznej (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Pola magnetyczne źródeł zasilania muszą znajdować się w granicach obowiązujących dla typowych środowisk szpitalnych i handlowych

Uwaga: Wartość UT jest napięciem zasilania AC przed zastosowaniem poziomu testowego

Wskazówki i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna

Test odporności	IEC 60601 poziom testowy	Poziom zgodności	Wskazówki – środowisko elektromagnetyczne
Zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej IEC 61000-4-6	3 V rms od 150 kHz do 80 MHz	Brak zastosowania	$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$
Pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej IEC 61000-4-3	10 V/m od 80 MHz do 2,7 GHz	10 V/m	$d = \sqrt[3]{P},$ 80MHz to 800MHz

			$d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 80MHz to 2,7GHz
--	--	--	---

gdzie P, to maksymalna wyjściowa moc znamionowa nadajnika w watach (W) wg danych producenta nadajnika, a d to zalecany odstęp w metrach (m). Natężenia pól pochodzących ze stałych nadajników radiowych, określone po wykonaniu inspekcji miejsc będących źródłem pola elektromagnetycznego, 1 powinny być mniejsze niż wymagane poziomy w każdym z zakresów częstotliwości. 2 Do interferencji może dość w sąsiedztwie miejsc oznaczonych symbolem:



UWAGA 1: Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się zakres wysokich częstotliwości.

UWAGA 2: Powyższe wskazówki nie stosują się we wszystkich sytuacjach. Propagacja fal elektromagnetycznych zależy od absorpcji i odbicia od materiałów, obiektów i ludzi.

a Natężenia pola pochodzące ze stałych nadajników takich, jak stacje bazowe sieci komórkowych/bezprzewodowych, telefonicznych, naziemnych radiowych systemów mobilnych, radia amatorskiego, rozgłośni radiowych AM i FM, rozgłośni TV są trudne do określenia. Aby uzyskać informację o źródłach pola elektromagnetycznego w okolicy, należy przeprowadzić oględziny terenu. Jeżeli w miejscu eksploatacji urządzenia zmierzone natężenia pól przekraczają powyższe poziomy, to należy dokonać obserwacji urządzenia w warunkach normalnego działania. Przy zauważeniu nieprawidłowych wskazań, konieczne będą dodatkowe pomiary, przy jednoczesnej zmianie ułożenia urządzenia lub zmianie lokalizacji miejsca pomiaru.

b Powyżej zakresu częstotliwości 150 kHz-80 MHz, natężenie pola powinno być mniejsze od 3 V/m.

Zalecane odległości urządzenia od przenośnych urządzeń emitujących fale radiowe

To urządzenie jest przeznaczone do pracy w środowisku występowania pola elektromagnetycznego, gdzie zaburzenia emitowanych częstotliwości radiowych są pod kontrolą. Użytkownik urządzenia powinien podjąć kroki, które ograniczą interferencje elektromagnetyczne poprzez zapewnienie minimalnych odległości urządzenia od przenośnego sprzętu telekomunikacyjnego emitującego fale radiowe (nadajniki) zgodnie z poniższymi zaleceniami, zakładając maksymalną moc sprzętu telekomunikacyjnego.

Maksymalna moc znamionowa nadajnika	Odległość w zależności od częstotliwości nadajnika		
	Od 150 kHz do 80 MHz	od 80 MHz do 800 MHz	od 80 MHz do 2,7 GHz
	$d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Dla nadajników o innej mocy znamionowej niż na powyższej liście, zalecana odległość d w metrach (m) może być oszacowana za pomocą równania zastosowanego dla częstotliwości nadajnika, gdzie P jest maksymalną wyjściową mocą znamionową nadajnika w watach (W) podaną przez producenta nadajnika.

UWAGA 1: Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się zakres wysokich częstotliwości.

UWAGA 2: Powyższe wskazówki nie stosują się we wszystkich sytuacjach. Propagacja fal elektromagnetycznych zależy od absorpcji i odbicia od materiałów, obiektów i ludzi.

<p>PRODUCENT Netop Industrial Company Limited Dabu Industrial Zone, Gangzi Village, Changping Town, Dongguan City, prowincja Guangdong, Chiny TEL: 0086-769-83999008 Faks: 0086-769-83999238 e-mail: sales@hee-beauty.co.kr www.hee-beauty.co.kr</p>	<p>Autoryzowany Przedstawiciel w UE: Wellkang Ltd EC REP Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Rd, Derry BT48 8SE, Irlandia Północna Telefon: +44(33)33031126 e-mail: AuthRep@CE-marking.eu</p>
<p>Importer: AP Plan Sp.J. ul. Wolności 13M lokal 102 64-130 Rydzyna TEL: +48 65 619 3855</p>	<p>www.diamedica.pl   biuro@diamedica.pl</p>

Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-02

Hee jest znakiem towarowym firmy Oriental Inspiration Limited.
©2012 Wszelkie prawa zastrzeżone.

