

Elektrody TensCare do elektrostymulacji twarzy



4 podwójne elektrody do twarzy stosowane w urządzeniach do elektroterapii

Kod produktu: **E-CM3050** Rozmiar: 30 x 50 mm

INSTRUKCJA OBSŁUGI



**PRZED UŻYCIEM, UWAŻNIE PRZECZYTAJ
INSTRUKCJĘ OBSŁUGI !**



Instrukcja stosowania

Stosuj z elektrostymulatorami EMS zgodnych z normą EN60601-2-10, takimi jak np. **Perfect BEAUTY**, czy **Sports TENS2**.

- 1) Przed użyciem upewnij się, czy skóra jest czysta i sucha. Aby zapewnić dobry kontakt elektrod ze skórą, możesz użyć ściereczki czyszczącej, np. firmy TensCare (kod **E-CW50**).



UWAGA: Nie umieszczaj elektrod na skórze, która nie posiada normalnego czucia oraz na skórze uszkodzonej (rany).

- 2) Wtyczki szpikowe (pin) od przewodów stimulatora włóż mocno do otworów od przewodów elektrod.



UWAGA: Elektroda do twarzy jest elektrodą podwójną, co oznacza, że składa się z pary elektrod. Oba przewody wychodzące z jednej elektrody podwójnej podłącz zawsze do tego samego przewodu wychodzącego z urządzenia (CH1 lub CH2).


- 3) Zdejmij elektrodę z folii zabezpieczającej lekko ciągnąc za narożnik.



UWAGA: NIE ciągnij za przewód wychodzący z elektrody.

Zawsze przed założeniem i zdjęciem elektrod na skórę upewnij się, czy urządzenie jest wyłączone.

- 4) Lepką powierzchnię elektrody umieść na skórze w miejscu pokazanym na rysunku. Przewód z czerwoną wtyczką powinien znajdować się najbliżej ucha. Na urządzeniu wybierz program do stymulacji twarzy lub program, który stosuje częstotliwość od 40 do 60 Hz i szerokość impulsów od 250 do 300 μ s.

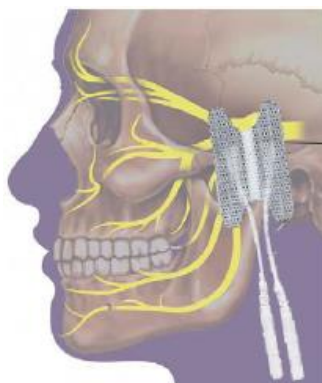

UWAGA: elektrody do twarzy są ok. 5 razy mniejsze od typowych elektrod do elektrostymulacji. Dlatego należy stosować dużo mniejszą intensywność stymulacji w porównaniu ze standardowymi elektrodami. Nadmierna gęstość prądu (natężenie/cm²) może uszkodzić skórę. Zalecamy stosować aparaty z możliwością krokowego zwiększania intensywności co 1 mA.


- 5) Delikatnie zdejmij elektrody ze skóry, zaczynając od dowolnego rogu. Nie ciągnij za cienkie przewody.
- 6) Nałóż elektrody na oryginalną folię ochronną i schowaj do plastikowego woreczka. Elektrody najlepiej przechowuj w lodówce szczelnie zamknięte.



UWAGA: Nigdy **nie podłączaj** elektrod krzyżowo, aby prąd przepływał w poprzek twarzy. Przy każdej elektrodzie powinien być podłączony zawsze jeden przewód z wtyczką **czarną** i **czerwoną** (od tego samego kanału).

Dodatkowe uwagi i porady

- **Przeciwwskazania:** rozrusznik serca, padaczka, nowotwór, rany w miejscu aplikacji.
- Dostarczone elektrody są wielokrotnego użytku (12-20 aplikacji), ale jeden komplet jest przeznaczony tylko dla jednej osoby.
- **Przed nalepieniem elektrod, należy dokładnie umyć, odtłuścić i wysuszyć skórę.**
- W celu uzyskania najlepszego przewodnictwa, zawsze upewnij się, czy są one w dobrym stanie i czy zachowują lepkość.
- Jeśli elektrody wyschną, dokup pakiet nowych elektrod. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest przywrócenie kleistości podłoża elektrody poprzez dodanie kropelki wody. Dodanie zbyt dużo wody sprawi, że elektrody będą zbyt miękkie. W celu przywrócenia lepszej przylepności, zaleca się umieścić elektrody w lodówce na kilka godzin. *Niedokładne przyleganie elektrody do skóry może być nieprzyjemne w odczuciach podczas stymulacji i może podrażnić skórę.*
- W bardzo wysokiej temperaturze otoczenia elektrody mogą stać się zbyt miękkie. W takich przypadkach, umieść je w lodówce, aż osiągną normalny stan.
- Typowy zabieg dwukanałowy wykorzystuje 2 elektrody podwójne (4 pojedyncze). Ponieważ w komplecie znajdują się 4 elektrody podwójne, najpierw wykorzystaj 2 elektrody podwójne, a jeśli nie będą już przydatne do użycia, użyj następne 2 elektrody.
- Podczas używania elektrod, staraj się nie ciągnąć za przewody. Przy niektórych zabiegach zalecamy nawet ustabilizowanie przewodów na skórze za pomocą dodatkowego plastra. Gdy warstwa żelu odklei się od warstwy materiałowej, spróbuj odchylić przewody na zewnątrz i docisnąć żel do materiału.
- Dostarczone elektrody nie zawierają lateksu.

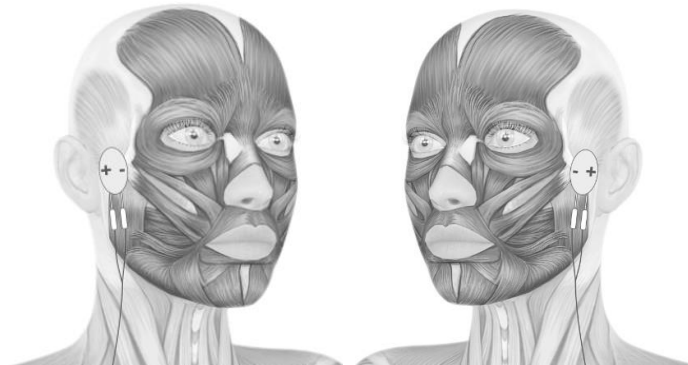

Żywotność nieotworzonych elektrod wynosi zwykle 2 lata. Okres ten może ulec skróceniu w wyniku oddziaływania zbyt dużej temperatury i/lub zbyt niskiej wilgotności powietrza.

Wytwórca: TensCare Ltd. 9 Blenheim Road Epsom Surrey KT19 9BE, Wielka Brytania Tel: +44(0) 1372 723434 	Autoryzowany przedstawiciel: Advena Ltd Tower Business Centre, 2nd Flr, Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta info@advenamedical.com Import/dystrybucja w Polsce: AP Plan Sp.J. ul. Wolności 13M lokal 102, 64-130 Rydzyna TEL: 65 619 3855 Sklep diaMedica www.diamedica.pl  
--	---