


# Aparat Magic Mask Plus


## Instrukcja obsługi

### Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie urządzenia Magic Mask Plus (model BC-037+). Jest to urządzenie do pielęgnacji skóry, które wykorzystuje różne wąskopasmowe długości światła dedykowane różnym problemom skórny. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem i zachowanie tej instrukcji obsługi do wykorzystania w przyszłości.

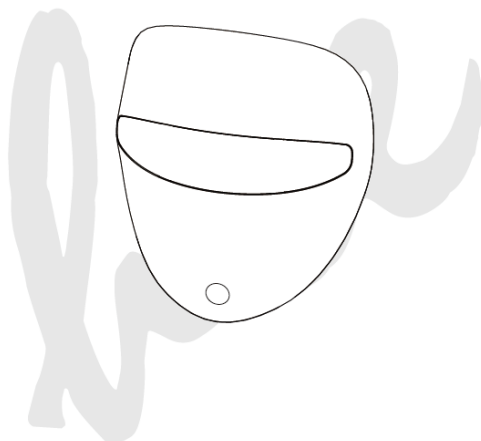


### Budowa i części składowe

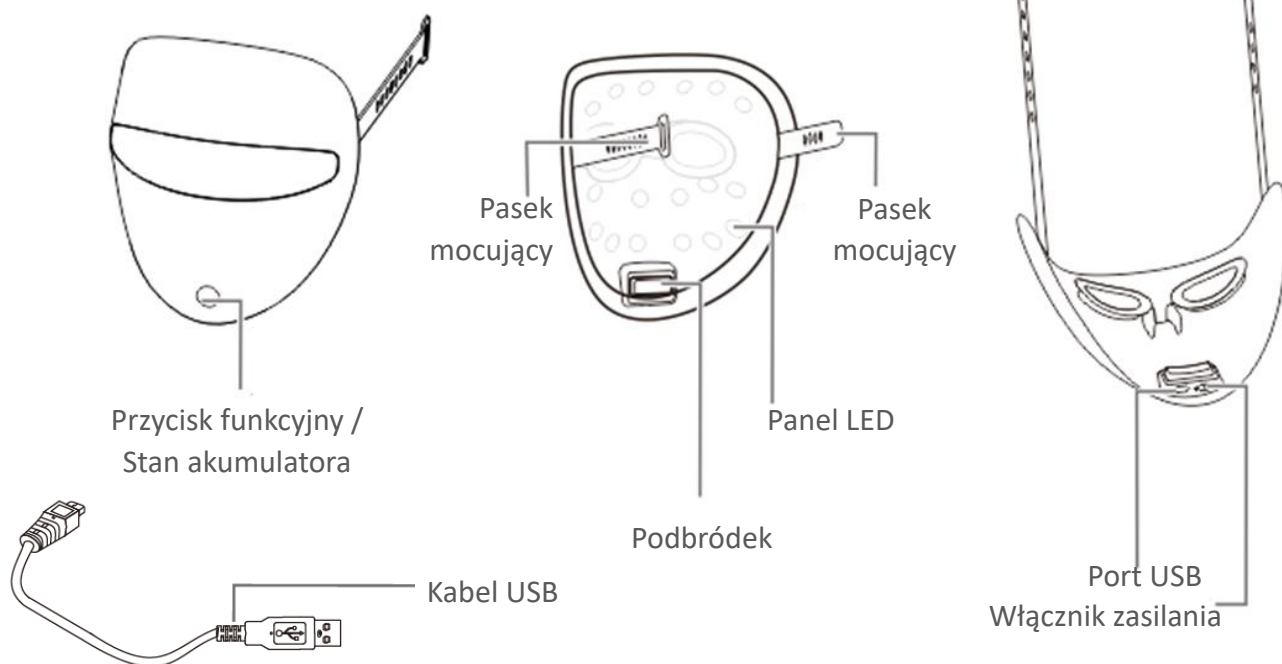

### Ładowanie akumulatora litowo-jonowego

1. Przygotuj jednostkę główną Magic Mask Plus BC-037+ i kabel USB.
2. Podłącz do gniazdka ładowania urządzenia kabel USB połączony z zasilaczem.
3. Wskaźnik akumulatora będzie migać podczas ładowania.
4. Czas ładowania wynosi około 2-3 godziny. Ładowanie zostanie zakończone, gdy wskaźnik przestanie migać i zmieni kolor na zielony.
5. W pełni naładowany akumulator może być używana przez około 80 minut.

UWAGA: Akumulator nie może być ładowany, gdy urządzenie jest włączone. Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, czy włącznik urządzenia jest w pozycji wyłączonej.

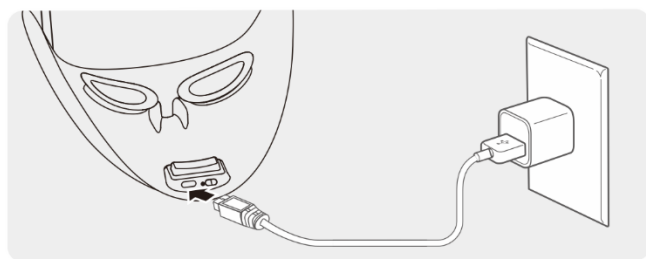

## Wskaźniki akumulatora

Wskaźnik stanu akumulatora emituje dwa kolory oznaczające różny stan naładowania. Włącz włącznik zasilania w pozycję (ON), aż zacznie migać zielone światło. Po 30 sekundach bezczynności, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb oszczędzania energii.

### Urządzenie jest w użyciu

- Zielony: Stan akumulatora jest wystarczający do zabiegu.
- Czerwony: Niski stan akumulatora, proszę naładować.

**Uwaga:** Gdy stan akumulator jest niski i wymaga naładowania, zacznie migać czerwone światło i będzie emitowany sygnał dźwiękowy: "Bi Bi Bi Bi"

### Urządzenie jest w trakcie ładowania

- Miganie na zielono: stan naładowania akumulatora na poziomie 30% - 80%.
- Zielone światło: ładowanie akumulatora zakończone.

**Uwaga:** Naładuj akumulator, jeśli urządzenie było przechowywane przez więcej niż 3 miesiące.

## Tryby zabiegowe

Magic Mask Plus BC-037+ wykorzystuje 4 specyficzne rodzaje światła LED, Niebieskie (445nm), Zielone (523nm), Czerwone (630nm) i Podczerwone (850nm), aby poprawić stan skóry w wielu wymiarach.

Tryb zabiegu (kolor LED)	Światło	Funkcja	Czas zabiegu (minuty)	Ile razy dziennie
A.Czerwony	Czerwone + Podczerwień	Poprawia strukturę skóry i jej elastyczność, prowadzi do bardziej promiennej cery	15	1
B.Różowy	Czerwone + Niebieskie	Ogólna poprawa zdrowia skóry	15	1
C.Niebieski	Niebieskie + Podczerwień	Reguluje produkcję sebum, poprawia ogólną jasność skóry	15	1
D.Zielony	Zielone + Podczerwień	Wyrównuje napięcie skóry, poprawia jasność i czystość cery	15	1

## Sposób użycia

1. Przed zabiegiem umyj i wysusz skórę na twarzy.
2. Załóż urządzenie na twarz i odpowiednio dopasuj elastyczną opaskę, aby maska była we właściwej pozycji i była pewnie umocowana.
3. Przesuń włącznik zasilania w pozycję ON, aby włączyć urządzenie.
4. Naciśnij przycisk funkcyjny, aby wybrać odpowiedni tryb zabiegu.
5. Zrelaksuj się i ciesz się zabiegiem. Po użyciu, wyłącz urządzenie. Gdy zabieg dobiegnie końca, usłyszysz trzy kolejne sygnały dźwiękowe informujące o zakończeniu zabiegu i automatycznie wyłączą się diody LED.



Przesuń włącznik w kierunku portu USB, aby włączyć urządzenie



Przełącznik światła LED

**UWAGA:** Urządzenie nie może działać podczas ładowania, dlatego przed użyciem urządzenia odłącz kabel ładowania. Akumulator zużywa się, gdy urządzenie znajduje się w stanie gotowości, dlatego wyłącz urządzenie, aby ograniczyć pobór mocy.

---

## Czyszczenie i konserwacja

- Wyczyść urządzenie miękką szmatką, gdy jest odłączone i wyłączone.
- Zwilż miękką szmatkę wodą i lekko wytrzyj urządzenie. Nie dopuść do tego, aby ani woda ani inne płyny nie dostały się do środka urządzenia. Pozostaw do wyschnięcia przed użyciem.
- Upewnij się, że wyłącznik zasilania jest wyłączony przed czyszczeniem.
- Naładuj w pełni akumulator, gdy urządzenie nie było używane przez dłuższy czas.
- Dobrze jest ładować akumulator przynajmniej raz na trzy miesiące.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie bardzo niskich temperatur oraz przez długi czas na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub promieniowania UV.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

## Ostrzeżenia i środki bezpieczeństwa

 **Przed użyciem urządzenia upewnij się u dermatologa, czy jakiegokolwiek zmiany skórne wynikają z obecności nowotworu lub wskazują na przedrakowe zmiany skórne.**

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego, a nie komercyjnego lub profesjonalnego.
- Jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią, przed użyciem urządzenia skonsultuj się z lekarzem.
- Przestań używać urządzenia, gdy w jakikolwiek sposób czujesz się niekomfortowo.

 **Nigdy nie używaj urządzenia w następujących przypadkach:**

- Jeśli w przeszłości występował postępujący nowotwór skóry np. czerniak, zmiany przedrakowe lub nietypowe plamy kosmetyczne w strefie, która ma być leczona.
- Jeśli masz infekcję skóry, opryszczkę pospolitą lub zmiany egzemy w strefie, która ma być leczona.
- Jeśli Twoja skóra jest wrażliwa na światło, co objawia się podrażnieniami lub reakcją alergiczną.

### Uwagi:

- Używaj urządzenia wyłącznie z dostarczonymi akcesoriami.
- Wszystkie akcesoria są przeznaczone tylko do tego urządzenia.
- Nie wpatruj się źródło światła na urządzeniu.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku.
- Nie potrząsaj, nie upuszczaj ani nie uderzaj mocno urządzenia.
- Nie demontuj urządzenia.
- Nie pozwól, aby dzieci bawiły się urządzeniem.,
- Urządzenie nie jest odpowiednie dla osób z rozrusznikiem serca lub z innymi implantowanymi urządzeniami medycznymi.
- Nie używaj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie sprzętu krótkofalowego lub mikrofalowego.
- Nie podłączaj tego urządzenia do innego sprzętu, aby uniknąć zakłóceń, należy trzymać się z dala od urządzeń o wysokiej częstotliwości.
- Urządzenia nie posiada ostrych krawędzi.
- Żadna modyfikacja tego urządzenia nie jest dozwolona.

## GWARANCJA

Urządzenie objęte jest roczną gwarancją, pod warunkiem, że jest użytkowane zgodnie z niniejszą instrukcją. Nigdy nie otwieraj ani nie demontuj urządzenia, co spowoduje utratę gwarancji.

W przypadku problemów lub chęci uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.

## Specyfikacja techniczna

**Nazwa produktu:** Magic Mask Plus (magiczna maska plus)

**Model:** BC – 037+

**Zasilanie:** 3,7 V / 780 mAh, wbudowany akumulator litowo-jonowy

**Długość fali:** Czerwona: 630nm Niebieska: 445nm  
Podczerwień: 850nm Zielona: 523nm

**Czas zabiegu:** 15 min dziennie

**Rozmiar produktu:** 179 mm \* 192 \* 91 mm

**Normalne warunki pracy:** Temperatura: 5 °C ~ 40 °C, Wilgotność względna: 30% RH ~ 80% RH  
Ciśnienie atmosferyczne: 70 ~ 106 kPa

**Warunki transportu i przechowywania:** Temperatura: -20 °C ~ 55 °C, Wilgotność względna: <93% RH  
Ciśnienie atmosferyczne: 70 ~ 106 kPa

**Żywotność urządzenia:** 2 lata

**Żywotność akumulatora:** przynajmniej 300 ładowań

## Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nic się nie dzieje, gdy włącznik zasilania jest przesunięty na ON.	Rozładowany akumulator	Naładuj akumulator
Naciśnięto przycisk funkcyjny, brak reakcji lub ciemna dioda LED.	Rozładowany akumulator Dioda LED jest uszkodzona	Naładuj akumulator Skontaktuj się ze sprzedawcą
Podczas ładowania, nie pali się wskaźnik ładowania	Kabel ładowania nie jest właściwie podłączony	Sprawdź, czy wtyczka po obu stronach kabla jest właściwie włożona. Odłącz, a następnie ponownie podłącz wtyczkę.
	Uszkodzony kabel USB	Odłącz kabel, a następnie podłącz ponownie. Lub wymień na nowy kabel USB.

## POZBYWANIE SIĘ URZĄDZENIA



Zużyte, całkowicie rozładowane akumulatory należy utylizować poprzez umieszczenie ich w specjalnie oznakowanym pojemniku do zbiórki zużytych baterii lub za pośrednictwem sprzedawcy sprzętu elektrycznego. Prawidłowa utylizacja akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego jest obowiązkiem prawnym.

### PRODUCENT

Netop Industrial Company Limited 

Dabu Industrial Zone, Gangzi Village, Changping Town, Dongguan City

provincia Guangdong, Chiny

TEL: 0086-769-83999008 Faks: 0086-769-83999238



### Importer:

AP Plan Sp.J.

ul. Wolności 13M lokal 102

64-130 Rydzyna

TEL: +48 65 619 3855

[www.diamedica.pl](http://www.diamedica.pl)



Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-23