


# Aparat „New Time Machine” do redukcji zmarszczek

Model: BC-043

## Instrukcja obsługi

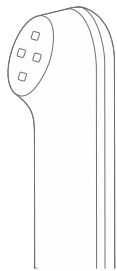

hee

Dziękujemy za wybranie urządzenia „**New Time Machine**” (tłum.: nowy wehikuł czasu). Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem i zachowanie tej instrukcji do wykorzystania w przyszłości. Ponieważ produkt podlega ciągłemu rozwojowi, w instrukcji mogą wystąpić pewne różnice dotyczące koloru lub zespołów w stosunku do wyglądu rzeczywistego urządzenia. Nasza firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach i instrukcji bez uprzedniego powiadomienia.


## Wykorzystanie produktu

„**New Time Machine**”, to urządzenie typu 3 w 1 do pielęgnacji skóry twarzy i poprawy urody. Może redukować zmarszczki i łagodzić skórę poprzez delikatne masowanie. Wykorzystuje również masaż mikrowibracyjny, aby rozluźnić skórę, a także posiada funkcję wprowadzania jonów promując wchłanianie substancji do pielęgnacji skóry.

## Skład zestawu

Jeśli brakuje jakichkolwiek akcesoriów, skontaktuj się ze sklepem detalicznym lub dystrybutorem.


1. Urządzenie
2. Instrukcja obsługi

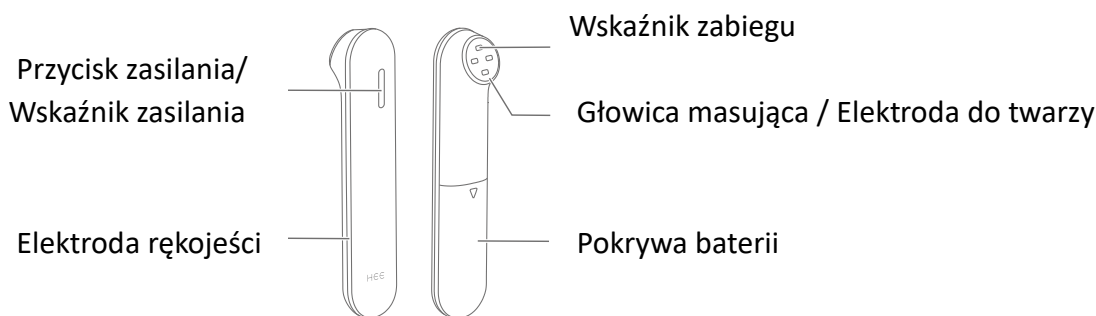

## Obsługa urządzenia i instalacja baterii

- Naciśnij przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby włączyć urządzenie. Wskaźnik zasilania zaświeci się na żółto.
- Naciśnij przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby wyłączyć urządzenie. Wskaźnik zasilania zgaśnie.
- Po włączeniu urządzenia, jeśli "elektroda rękojeści" i "elektroda twarzowa" nie będą dotykały ludzkiego ciała, urządzenie przejdzie w tryb czuwania. W tym trybie urządzenie wyłączy się automatycznie po 30 sekundach.
- Po włączeniu urządzenia, jeśli w międzyczasie "elektroda rękojeści" i "elektroda twarzowa" będą dotykały ciała (np. ręki i twarzy), zostanie to wykryte i urządzenie zacznie działać (zacznie wibrować głowica masująca, a wskaźnik zabiegu zacznie migać na żółto).
- Urządzenie zatrzyma się automatycznie po 45 sekundach pracy. Jeśli w międzyczasie obie elektrody ponownie dotkną ciała, zabieg rozpocznie się od nowa.
- Gdy napięcie baterii jest zbyt niskie, wskaźnik zasilania zamiga 3 razy, a następnie zgaśnie. Wymień baterię.

## Instalacja/wymiana baterii:

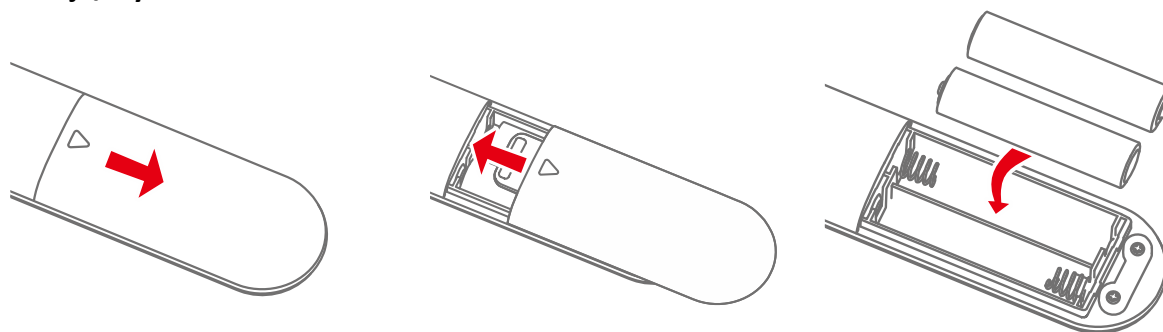

1. Wypchnij pokrywę baterii poprzez jej naciśnięcie i mocne przesunięcie wzdłuż rękojeści.
2. Włóż baterię i pamiętaj o oznaczeniach polaryzacji baterii (+ -).
3. Wsuń pokrywę baterii.

## Ostrzeżenia

**Przed użyciem urządzenia radzimy udać się do dermatologa, który sprawdzi wszelkie zmiany skórne pod kątem obecności nowotworu lub przedrakowych zmian skórnych.**

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego, a nie do użytku komercyjnego lub profesjonalnego.
- To urządzenie może być używane tylko do ograniczania zmarszczek, a nie do innych celów.
- Nie stosować na otoczkę piersi lub błony śluzowe narządów płciowych.
- Jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią, przed użyciem zasięgnij porady lekarza.
- Przestań używać urządzenia, jeśli czujesz się niekomfortowo.

**Nigdy nie używaj urządzenia w następujących przypadkach:**


- Jeśli używasz wszczepialnych urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca lub inne wyroby metalowe.
- Jeśli u pacjenta występował postępujący nowotwór skóry lub czerniak lub zmiany przedrakowe lub nietypowe plamy kosmetyczne w strefie, która ma być poddana zabiegowi.
- Jeśli masz infekcję skóry, opryszczkę pospolitą lub egzemę w obszarze zabiegu.
- Jeśli masz zmiany błony śluzowej w obszarze, który ma być poddany zabiegowi.
- Jeśli Twoja skóra jest wrażliwa na światło, co objawia się pojawieniem się podrażnień lub reakcji alergicznych.

## Sposób użycia

1. Nałóż i równomiernie rozprowadź produkty pielęgnacyjne na oczyszczonej skórze.
2. Naciśnij przycisk zasilania przez 1 sekundę i włącz go. Wskaźnik zasilania zaświeci się na żółto, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania.
3. Umieść urządzenie i przyłóż głowicę masującą do skóry, a rozpocznie się zabieg. Przesuwaj na skórze urządzenie po obszarze zabiegowym w kierunku od środka na zewnątrz.


## Jak używać w określonych miejscach

Czoło

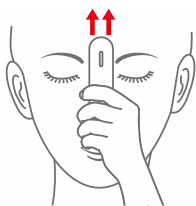

Masuj czoło do góry

wronie łapki

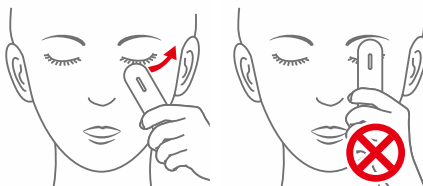

Masuj do góry i nie używaj na samych oczach.

bruzdy nosowo-wargowe



Masuj bruzdy nosowo-wargowe do góry

### Uwagi

- Proszę nie nakładać kosmetyków bezpośrednio na głowicę masującą.
- Urządzenie będzie działało tylko wtedy, gdy jest używane samodzielnie. Nie może działać, jeśli osoba korzystająca z urządzenia stosuje to urządzenie na innej osobie.
- Cięża i stany chorobowe organizmu: nie stosować bez uzyskania zgody lekarza.
- Nie używaj, jeśli nosisz jakiegokolwiek urządzenie medyczne, takie jak rozrusznik serca lub inne urządzenie medyczne.



Używaj urządzenia wyłącznie z dostarczonym akcesorium.  
Wszystkie akcesoria są przeznaczone wyłącznie dla tego urządzenia.



Nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku.



Unikaj zamaczaj urządzenia.



Nie kieruj urządzenia w kierunku oczu, aby uniknąć dyskomfortu.



Nie używaj urządzenia, gdy jest uszkodzone.



Nie potrząsaj, nie upuszczaj ani nie uderzaj mocno urządzenia.  
Nie wolno go demontować.



Upewnij się, że dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

## Gdy urządzenie nie działa (nie wibruje)

Sprawdź:

- Czy prawidłowo trzymasz za uchwyt?
- Czy nałożono wystarczającą ilość kosmetyków?
- Czy baterie zostały włożone właściwymi biegunami?
- Czy baterie nie są zużyte?
- Po naciśnięciu przycisku zasilania pali się wskaźnik zasilania nie działa lub zamiga 3 razy i gaśnie, co oznacza, że bateria jest niska. Wymień wtedy baterię.

## Czyszczenie i przechowywanie

Należy czyścić urządzenie wysuszoną szmatką.

Nie zanurzać w wodzie ani zmywarce. Urządzenie nie jest wodoodporne.

Do czyszczenia nie używaj chemikaliów, takich jak rozcieńczalnik do farb, benzen, chlor, środki zasadowe lub detergentu kwasowego.

Unikaj bezpośredniego światła słonecznego i nie przechowuj w wilgotnych miejscach.

## Specyfikacja techniczna

Zasilanie:	DC 3V (2 * AAA)
Czas pojedynczego zabiegu:	45s+/- 5s
Szczytowa długość światła:	590nm +/- 5nm
Moc świetlna:	1,5-5mW
Efektywna powierzchnia emisji:	0,285 cm
Wymiary:	135 (dł.) x 29 (szer.) x 26 (wys.) mm
Waga:	35g

## Gwarancja

Urządzenie objęte jest gwarancją wynoszącą jeden rok od daty zakupu, pod warunkiem że jest użytkowane zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Nigdy nie otwieraj ani nie demontuj urządzenia, gdyż gwarancja Utraci wtedy swoją ważność.

Jeśli masz jakiś problem lub chcesz uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź oficjalną stronę internetową [www.hee-beauty.co.kr](http://www.hee-beauty.co.kr) lub skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

### PRODUCENT

Netop Industrial Company Limited

Dabu Industrial Zone, Gangzi Village, Changping Town, Dongguan City, prowincja Guangdong, Chiny

TEL: 0086-769-83999008 e-mail: [sales@hee-beauty.co.kr](mailto:sales@hee-beauty.co.kr) [www.hee-beauty.co.kr](http://www.hee-beauty.co.kr)



### Importer:

AP Plan Sp.J.

ul. Wolności 13M lokal 102, 64-130 Rydzyna

TEL: +48 65 619 3855



[www.diamedica.pl](http://www.diamedica.pl)

Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-02

Hee jest znakiem towarowym firmy Oriental Inspiration Limited.

©2012 Wszelkie prawa zastrzeżone.

